

Inhoudsopgave patiëntendagboek beademingsapparaat Astral 150 NIV

Onderwerp



Bladzijde

Instructiekaart Astral 150 NIV.....	1
Bereikbaarheid Centrum voor Thuisbeademing Maastricht (CTbM).....	4
Patiënteninformatie Vragen en Opmerkingen.....	6
Thuisbeademing (non-invasief).....	7
Ademhalen.....	9
Disposables bestellen.....	11
Storing beademingstoestel.....	12
Stroomstoring Astral 150 NIV: Wat te doen bij maskerbeademing?.....	13
Reizen met beademing.....	15
Vakantie aanvraagformulier.....	17
Scholing Centrum voor Thuisbeademing (CTB).....	19

INSTRUCTIEKAART - NIV !



ASTRAL 150 — RESMED

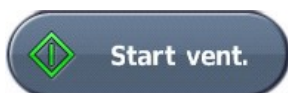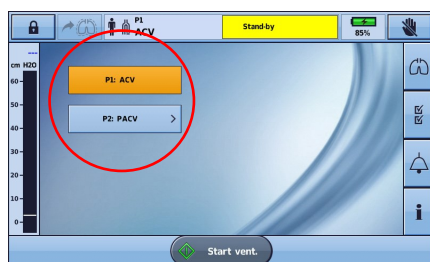

introductie

Beschrijving:

2. Inademingspoort (naar patiënt), Aansluiting voor de beademingsslang.
4. Ethernet-connector (alleen voor onderhoud)
5. USB-connector (voor downloaden gegevens)
6. Mini-USB-connector (alleen voor onderhoud)
7. DC-ingang voor stroomadapter
8. **Aan/uit-drukknop van het apparaat**
9. Connector voor SpO2-sensor
10. Vijf-pinsconnector voor afstandsalarm
11. Zuurstofinlaat voor lage flow (maximaal 30 l/min)
12. Luchtinlaat (compleet met hypoallergeen filter)

Beademing Starten en Stoppen

Indien er meerdere modi ingesteld zijn (zie *omcirkeling*) drukt u op de gewenste modus alvorens te starten, en bevestigt deze. (U kunt ook tijdens een in werking zijnde modus wisselen van modus).

De ventilatie starten:

1. Druk op de groene aan/uit-knop aan de achterzijde van het apparaat (als het apparaat nog niet is ingeschakeld).
2. Druk op de knop afgebeeld hiernaast. De ventilatie wordt gestart.
3. Koppel zo nodig de zuurstof aan.

De ventilatie stoppen:

- De ventilatie kan op elk moment en vanuit elk scherm worden gestopt.
1. Als zuurstof is aangesloten, schakelt u de zuurstoftoediening uit.
 2. Druk op de hiernaast afgebeelde knop en houd deze knop ingedrukt.


ASTRAL 150 RESMED NIV



Opbouw systeem


1. Sluit de luchtslang aan op de inademenspoort van het apparaat.
2. Sluit de (optionele) bevochtiger aan
3. Sluit het masker aan.

Menubalk Patiënten menu

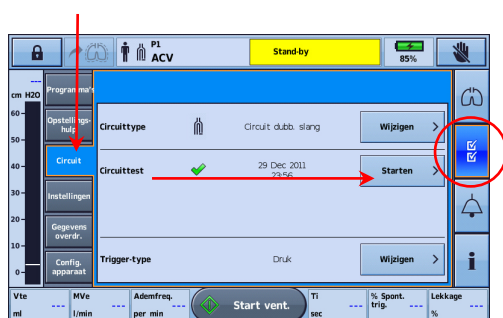

- Circuittest/slangentest:

Druk op de omcirkelde knop en vervolgens op de aangegeven knop in het submenu. Druk op “starten” bij circuit-test en volg de instructies. (Alleen mogelijk indien de ventilatie gestopt is!)

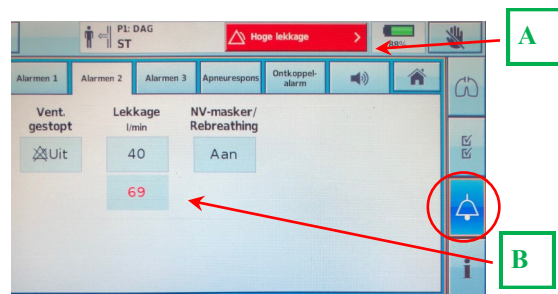

- Alarmeren:

Druk op de omcirkelde knop en vervolgens op het tabblad “Alarmeren 2”. Het meest voorkomende alarm is het “Hoge lekkage” alarm. Er zal een alarmmelding zichtbaar zijn boven in het scherm. (A) Dit alarm ontstaat wanneer het masker niet goed aansluit op het gezicht of dat de slang losgeschoten is. De gemeten lekkage zal rood kleuren omdat de alarmgrens overschreden is. (B)



- Alarmhistorie

Druk op de omcirkelde knop en vervolgens op de aangegeven knop in het submenu. De alarmhistorie wordt weergegeven.

Gebeurtenissen: hier worden alle in het logboek vastgelegde gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden, weergegeven.

- Alarm silence knop


Indien de getoonde (oranje) knop  ingedrukt wordt zal er gedurende 2 min. geen akoestisch alarm volgen. De knop zal knipperen.

Het icoontje hiernaast wordt afgebeeld in de menubalk 

- Het weergegeven actieve alarm resetten:


1. Druk op  om het alarm te onderdrukken. De knop brandt en knippert.
2. Druk nogmaals op om het alarm te resetten. Het alarmbericht wordt uit het alarm vak verwijderd. Het wordt ook van het scherm Actieve alarmen gewist.

Zuurstof toevoegen aan de Astral - 150

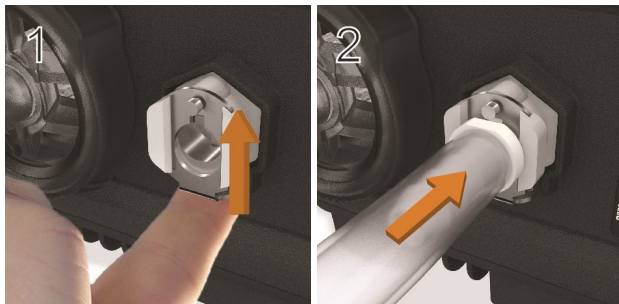

- Zuurstof toevoegen

1. Ontgrendel de zuurstofinlaat voor lage flow aan de achterzijde van het apparaat door de vergrendelklem omhoog te duwen.
2. Steek het ene uiteinde van de zuurstoftoevoerslang in de zuurstofconnectorpoort. De slang wordt automatisch vergrendeld.
3. Sluit het andere uiteinde van de zuurstoftoevoerslang op de zuurstoftoevoer aan.
4. Start de ventilatie.
5. Zet de zuurstof aan en stel deze op de gewenste flowsnelheid of het FiO₂-niveau in.

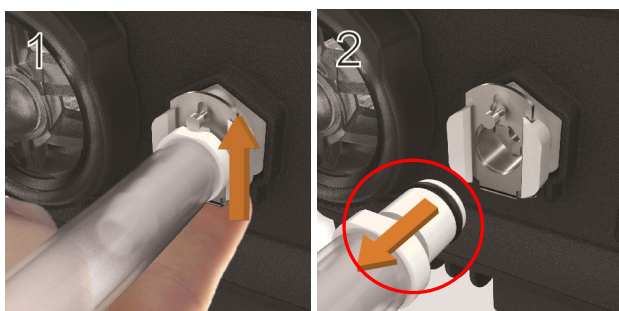

- Zuurstof afkoppelen

1. Ontgrendel de zuurstofinlaat voor lage flow aan de achterzijde van het apparaat door de vergrendelklem omhoog te duwen.
2. Verwijder de zuurstoftoevoerslang uit de zuurstofconnectorpoort.

PS: Om zuurstof toe te voegen heeft u een speciale koppelstuk nodig die verkrijgbaar is via CTBM (rood omcirkeld).

Luchtfilter vervangen



1. Ontgrendel het luchtfilterdeksel door het linksom te draaien.
2. Trek het luchtfilterdeksel van het apparaat.
3. Trek het luchtfilter van het deksel en werp het filter weg.
4. Steek een nieuw filter in het deksel.
5. Plaats het luchtfilter en het deksel weer in het apparaat.
6. Draai het deksel rechtsom om ze op hun plaats vast te zetten.

Technisch en huishoudelijk Onderhoud

- In geval van een technische storing dient u contact op te nemen met de leverancier van het toestel. (Zie firma sticker aan de zijkant van het toestel).
- Maak wekelijks met een vochtige doek het apparaat schoon.
- Vervang 1 x per kwartaal het luchtfilter
- Vervang eenmaal per vier maanden de slangenset en doe een nieuwe circuittest/ slangentest.

Bereikbaarheid Centrum voor Thuisbeademing Maastricht (CTbM)

Bereikbaar van CTbM

Telefoonnummer: 043-387 63 84

Telefonisch spreekuur:

- Maandag tot en met donderdag van :
09:00 uur tot 12:00 uur
Vrijdag van :
09:00 uur tot 12:00 uur en 14:00 uur tot 16:00 uur.
`s Middags zijn wij, behalve vrijdag, alleen bereikbaar voor spoedvragen.
Via een keuzemenu kunt u kiezen om doorverbonden te worden met de verpleegkundig consulent of de technische dienst.
Ook wordt het telefoonnummer van Vivisol vermeld voor het bestellen van disposables.

Buiten kantooruren

- Op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend, belt u met het centrale nummer van het MUMC+.
043- 387 65 43.
Vraag naar de dienstdoende CTbM-consulent.

Website

Het CTbM heeft ook een eigen website waar u informatie over het CTbM en thuisbeademing kunt vinden: ongziekten.mumc.nl en klik op foto "Thuisbeademing"

Nieuwsbrief

Het CTbM brengt één tot twee keer per jaar een nieuwsbrief uit om patiënten te informeren over ontwikkelingen binnen het CTbM. Zo blijft u op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen en eventuele veranderingen binnen "het Centrum voor Thuisbeademing Maastricht"

U kunt zelf aangeven of u deze nieuwsbrief wilt ontvangen. U kunt deze per post of digitaal ontvangen. Dat laatste heeft onze voorkeur.

Wilt u de nieuwsbrief wil ontvangen, dan kunt u zich aanmelden via de website of via ctbm@mumc.nl .

U kunt zich ook altijd uitschrijven voor onze nieuwsbrief. Dat kan via de digitale nieuwsbrief of, als u de nieuwsbrief per post ontvangt ,via telefoonnummer :043-387 63 84.

Bij storingen aan het beademingstoestel:

Als u een storing heeft aan uw apparaat belt u de onderhoudsfirma.

Het telefoonnummer is: 043-3876548

Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.

Laatst bijgewerkt op 7 maart 2024.



Patiënteninformatie Vragen en opmerkingen

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Thuisbeademing (non-invasief)

Na overleg met uw arts is besloten dat u thuisbeademing krijgt.

U krijgt van ons een informatiemap. Hierin vindt u alle informatie die u nodig heeft over thuisbeademing en de werking van uw beademingstoestel.

Bewaar deze map dus goed bij uw toestel, zodat u hem altijd bij de hand heeft.

Het Centrum voor Thuisbeademing Maastricht

Patiënten die thuisbeademing nodig hebben, worden begeleid door het Centrum voor Thuisbeademing Maastricht, kortweg CTBM.

Dit centrum is een onderdeel van de afdeling Longziekten van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+).

In Nederland zijn vier van dergelijke centra: in Groningen, Rotterdam, Utrecht en Maastricht.

De vier centra werken samen in de Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning, de VSCA. Dit is een organisatie van patiëntvertegenwoordigers en hulpverleners die betrokken zijn bij de chronische beademingszorg. Alle centra hebben hetzelfde doel: het behandelen van mensen met ernstige ademhalingsstoornissen buiten het ziekenhuis.

Dat kan thuis zijn, maar bijvoorbeeld ook in een revalidatiecentrum of verpleeghuis.

In Nederland kennen we twee beademingsvormen:

- beademing via een mond-neusmasker (non-invasief)
- beademing via een tracheostoma (invasief).

Een tracheostoma is een kunstmatige opening in de luchtpijp (trachea), net onder de adamsappel, waardoor een keelbuisje (canule) naar binnen wordt gebracht.

Welke ademhalingsondersteuning iemand krijgt, is afhankelijk van het ziektebeeld en wordt vastgesteld in overleg met de CTBM-arts. Bij u is gekozen voor beademing via een mondneusmasker. Het masker is via een slang verbonden met het beademingstoestel. Via de slang en het masker blaast het beademingstoestel lucht in uw longen. Het ademen door een mondneusmasker is vaak even wennen.

Vorbereiding en opname

Beademing thuis lijkt misschien eenvoudig, maar vraagt een zorgvuldige voorbereiding. Om u goed voor te bereiden op de thuisbeademing wordt u enkele dagen opgenomen in het Maastricht UMC+.

Tijdens de opname leggen wij u uit wat thuisbeademing precies is en wat het voor u gaat betekenen. U en uw naasten leren de beademingsapparatuur bedienen zodat u er thuis goed mee kunt omgaan. Het kan zijn dat aanvullend onderzoek nodig is om het beademingstoestel goed in te kunnen stellen. Het toestel wordt zo ingesteld dat de beademing comfortabel voor u is.

De mogelijkheid bestaat een slaapkamer te huren voor uw familielid of begeleider tijdens uw opname. Informeer hiernaar op de afdeling waar u opgenomen wordt.

Ontslag

Als u na enkele dagen ontslagen wordt uit het Maastricht UMC+, kunnen u of uw naasten het beademingstoestel zelf bedienen. Nadat u ontslagen bent, wordt u in de regel binnen twee weken thuis bezocht door een CTBM- consulent. Uw huisarts wordt door ons geïnformeerd en voorzien van relevante informatie. U krijgt ook een afspraak voor een eerste bezoek aan de polikliniek van het CTBM. Meestal vindt dat bezoek plaats binnen zes weken nadat u weer thuis bent.

Nazorg

Tijdens uw eerste bezoek aan de polikliniek van het CTBM overlegt de arts met u over het vervolg van uw behandeling. Normaal gesproken bezoekt de CTBM- consulent u één tot twee keer per jaar thuis. De consulent zal dan in principe gedurende de nacht een meting doen om uw beademing te evalueren. Verder krijgt u één tot twee keer per jaar een uitnodiging om naar de polikliniek van het CTBM te komen. Het is mogelijk dat uw behandelend arts nog andere onderzoeken voorschrijft. Ook krijgt u éénmaal per twee jaar een bezoek van de leverancier van uw beademingstoestel. Die voert een periodieke technische controle van uw toestel uit.


Als u een afspraak heeft bij de polikliniek van het CTBM, moet u uw beademingstoestel, uw masker en beademingsslangen meenemen.



Ademhalen

Hoe gaat de ademhaling?

Ademhalen gaat meestal vanzelf. U ademt lucht in via uw neus of mond. En u ademt de lucht weer uit via uw neus of mond.

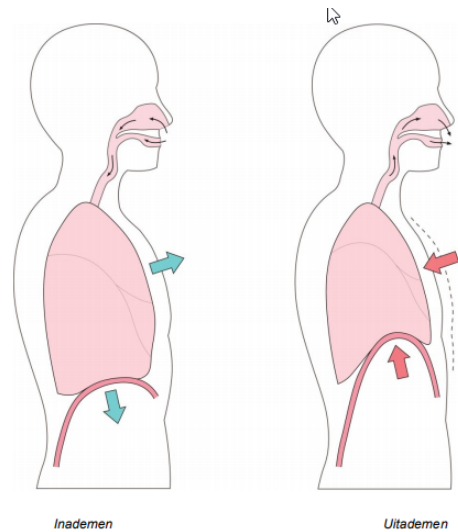

Inademen

- U ademt lucht in met zuurstof.
- De lucht gaat via uw neus of mond door de luchtpijp naar uw longen.
- De longen nemen de zuurstof op.
- De longen geven zuurstof af aan het bloed.
- Nu heeft het bloed veel zuurstof in zich.
- Het hart pompt het bloed verder door uw lichaam. Zo komt de zuurstof bij alle spieren en organen. Spieren en organen hebben zuurstof nodig om te kunnen werken, dus zuurstof is nodig om te leven.

Uitademen

- Uw lichaam gebruikt de zuurstof om voedingsstoffen te verbranden.
- Bij dat verbranden ontstaat energie, water en koolzuur (CO_2).
- De energie is nodig om te leven.
- Het water gaat weer weg uit uw lichaam via de nieren, de huid en het uitademen.
- Het koolzuur (CO_2) is een afvalproduct. Uw lichaam moet het koolzuur weer kwijtraken. Het bloed brengt het koolzuur naar de longen. Door uit te ademen, gaat het koolzuur weer weg uit uw lichaam.

Te weinig ademen

Wanneer u te weinig lucht in- en uitademt, daalt de hoeveelheid zuurstof in uw bloed, terwijl de hoeveelheid koolzuur in uw bloed stijgt. Dit heet hypoventilatie. 'Hypo' betekent 'weinig'. 'Ventilatie' betekent 'ademhaling'.

De oorzaak kan zijn:

- een spierziekte
- een longziekte
- of een ziekte die te maken heeft met slaap.

Klachten

Als hypoventilatie lang duurt, kunt u klachten krijgen. Vaak ontstaan die klachten langzaam. Klachten die kunnen ontstaan zijn:

- hoofdpijn
- sufheid overdag
- nare dromen
- weinig zin om te eten
- problemen met concentreren
- zweten

Wat kunt u doen?

Te weinig ademen kan na een tijdje erge gevolgen hebben.

Thuisbeademing kan ervoor zorgen dat u minder klachten krijgt en dat u een betere kwaliteit van leven heeft.

Disposables bestellen

via mijn.vivisol.nl

U maakt gebruik van een beademingsapparaat van het Centrum voor Thuisbeademing Maastricht, het CTbM. Hier worden ook artikelen bij geleverd die periodiek (regelmatig) vervangen moeten worden: de zogenaamde disposables. In dit informatieblad leest u hoe u die disposables kunt bestellen via www.vivisol.nl

1. **Ga naar mijn.vivisol.nl** De startpagina verschijnt.
2. **Klik op 'Ik gebruik beademingsapparatuur van het CTB'** Het inlogscherf verschijnt.
3. **Vul de gebruikersnaam en het wachtwoord in die u van Vivisol heeft gekregen en klik op 'OK'** U komt nu op de homepage van Mijn Vivisol.
4. **Klik op de button 'Mijn disposables' linksboven op het scherm** U ziet nu een overzicht van de artikelen die u kunt bestellen. *Mist u een artikel in dit overzicht? Neem dan contact op met het CTbM.*
5. **Vul per artikel het aantal in dat u wilt bestellen. Klaar? Klik dan op 'Bestellen'**
6. **Klik rechtsboven op het winkelwagentje** Er verschijnt een scherm met uw besteloverzicht.
7. **Controleer uw bestelling en klik op 'Bestelling indienen'** *Klopt uw bestelling niet? U kunt op dit scherm de aantallen aanpassen en artikelen verwijderen. Wilt u alsnog een artikel toevoegen? Klik dan op 'Naar artikelen'. U komt dan weer uit bij stap 5 van deze handleiding. Er verschijnt een scherm met uw gegevens.*
8. **Controleer uw gegevens en klik op 'Verder'** Als dat nodig is, kunt u hier, naast uw eigen gegevens, ook de gegevens van een contactpersoon invullen, zoals een familielid of verzorgende. Kloppen uw gegevens niet? Neem dan contact op met het CTbM. **Er verschijnt een scherm met uw adresgegevens.**
9. **Geef, als u dit wenst, een ander afleveradres op en klik op 'Verder'** U ziet nu het eindoverzicht van uw bestelling.
10. **Klopt alles? Vink het vakje 'Algemene voorwaarden' aan en klik op 'Verzenden'** U heeft uw bestelling geplaatst. Vivisol gaat uw bestelling verwerken.
11. **Zodra uw bestelling is verwerkt, ontvangt u een e-mail met een bevestiging van uw bestelling en een track- & tracecode.**

Als Vivisol geen e-mailadres van u heeft, ontvangt u deze bevestigings-e-mail niet. U kunt uw e-mailadres in dat geval doorgeven via beademing@vivisol.nl

Uw bestelling wordt zo spoedig mogelijk verzonden.

Adresgegevens

- www.vivisol.nl

Swaardvenstraat 27 *

5048 AV Tilburg

T: 013- 523 10 23

E: beademings@vivisol.nl



Storing beademingstoestel

Wat kunt u doen

Heeft u een belangrijke storing aan uw apparaat voor beademing?

Heeft u een storing aan uw apparaat? Of is uw apparaat kapot? Bel dan de onderhoudsfirma. Het telefoonnummer is: **043-3876548**. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar. Deze apparaten zijn:

Het Centrum voor Thuisbeademing Maastricht werkt samen met een firma die de reparatie doet van uw apparaat voor beademing. De firma doet dat ook voor de andere apparaten die bij de beademing horen.

Deze apparaten zijn:

- het apparaat voor beademing
- de bevochtiger
- het uitzuigapparaat
- de hoestmachine
- de trolley (karretje op wielen)
- de saturatiemeter (het apparaat dat het zuurstofgehalte meet)

Als u een storing heeft aan één van deze apparaten belt u de onderhoudsfirma.

Het telefoonnummer is: **043-3876548**

Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.

De firma moet verplicht na de melding binnen 4 uur het probleem oplossen.

De firma komt alleen binnen Nederland naar u toe voor reparaties. Ze komen ook naar de Waddeneilanden.

Stroomstoring bij Astral: Wat te doen bij maskerbeademing?

U heeft maskerbeademing. Uw beademingstoestel heeft een accuvoorziening. Wat moet u doen als er een stroomstoring is?

Wat te doen bij een stroomstoring?

Bij een stroomstoring handelt u - zowel overdag als 's nachts - als volgt:

- Maak gebruik van de accustroom.
- Per beademingstoestel heeft u zes tot acht uur accustroom.
- Voor de uitzuigpomp is dit één uur per uitzuigpomp (laat die niet onnodig aanstaan!).
Let op: uw bevochtiger werkt niet op accustroom.

Volg het onderstaande stroomschema.

Duurt de stroomstoring langer dan twaalf tot zestien uur:

- Ga indien mogelijk naar familie of kennissen die wel stroom hebben. Is dat niet mogelijk:
- Neem contact op met uw huisarts (bel op of stuur een mantelzorger naar de huisarts).
- Meld dat u een beademingsafhankelijke patiënt bent en dat uw hulp nodig heeft.
- De huisarts regelt dan een installatieplaats met stroom.

Buiten kantooruren is het CTbM bereikbaar via de telefooncentrale van het ziekenhuis:

043-387 65 43. *Vraag naar de dienstdoende verpleegkundig consulent van de thuisbeademing.*

Wilt u weten hoe lang de stroomstoring zal duren, dan kunt u het Nationaal Storingsnummer gas en stroom bellen: 0800 – 9009.

Dat nummer is 24 uur per dag bereikbaar.

Schema langdurige stroomstoring bij chronische beademing

Voorzorgsmaatregelen:

Apparatuur met een accu altijd verbinden met netstroom om accu capaciteit te garanderen. Beademingsballon altijd aanwezig bij korte beademingsvrije tijd.

Er is een stroomstoring.

Probeer er achter te komen hoe lang de stroomstoring gaat duren (stroomleverancier).
CTB informeren bij duur **langer dan 4 uur**.

Niet afhankelijk van beademingsapparatuur.

Geen accu aanwezig.

Beademingslang loskoppelen van masker.
Bij geluidsalarm machine uitzetten.
Indien mogelijk zonder beademing verder slapen.
Eventueel rechtop zittend slapen in bed of stoel.

Wel afhankelijk van beademingsapparatuur.

Controleer accu capaciteit (interne en externe accu, rolstoelaccu).

Beademing continueren

Zoek onderdak bij familie of vrienden die wel stroom hebben.
Neem altijd de **CTB map** mee.
Gebruik indien aanwezig **extra accu / beademingsapparaat**.

Eerder genoemde is niet mogelijk en u verwacht in de problemen te komen.

Neem contact op met het Centrum voor Thuisbeademing
Zie informatiemap van het CTB



Reizen met beademing

Ook met thuisbeademing kunt u veilig op vakantie

In deze folder leest u alle informatie over op reis gaan met beademing.

Het is heel belangrijk dat u de vakantie goed gaat voorbereiden.

Wat moet u doen als voorbereiding?

Geef uw vakantie op zijn laatst 6 weken voor vertrek door aan:

- Het CTbM
- Als u via een reisbureau boekt, geef door dat u beademing gebruikt.
- De luchtvaartmaatschappij als u met het vliegtuig reist.

U bent zelf verantwoordelijk voor het goed voorbereiden van uw reis met beademing.

Vakantie melden bij het CTbM

Geef uw vakantie op zijn laatst 6 weken voor vertrek door:

- U geeft via de telefoon of de mail door aan de secretaresse dat u op vakantie gaat.
- Het CTbM stuurt u dan een 'Vakantie aanvraagformulier' op via de post.
- U kunt dat formulier ook downloaden via onze thuisbeademingmaastricht.nl

U vindt het aanvraagformulier ook in het dagboek.

Op vakantie in Nederland

Geef uw vakantie op zijn laatst 6 weken voor vertrek door:

- U geeft via het 'Vakantie aanvraagformulier' het vakantie adres door aan het CTbM.
- Neem altijd een reserve masker en slangen mee op vakantie.
- Als u zuurstof gebruikt, vraagt u aan de firma extra voorraad zuurstof.

Op vakantie in het buitenland

Geef uw vakantie op zijn laatst 6 weken voor vertrek door:

- U geeft via het 'Vakantie aanvraagformulier' het vakantie adres door aan het CTbM.
- Het team van het CTbM adviseert of een reserve apparaat meenemen op vakantie nodig is
- U krijgt van het CTbM een brief voor de douane in 4 talen.

Op vakantie met het vliegtuig

Let op! Niet iedere vliegmaatschappij staat een apparaat voor beademing toe.

Vraag dat goed na voordat u een vlucht boekt. Ook als u zuurstof gebruikt.

- Check op de website van de vliegmaatschappij of u een *Medical information sheet* moet invullen. Deze sheet vindt u dan ook op de website van de maatschappij.
- Vul het formulier in.
- Een apparaat voor beademing mag **NIET** in de kofferruimte. Het moet dus mee in de cabine.
- Geef door aan de vliegmaatschappij dat uw apparaat voor beademing bij de handbagage zit.
- Onderop het apparaat zit een sticker met een vliegtuig. Dat betekent dat dit apparaat in het vliegtuig mag.
- Geef door aan de vliegmaatschappij als u de beademing (misschien) gaat gebruiken in het vliegtuig.
- De meeste vliegmaatschappijen laten GEEN zuurstof toe in het vliegtuig. Dat komt door gevaar voor ontploffing.

Wat neemt u mee op vakantie?

- Uw eigen apparaat voor beademing met alle spullen in de draagtas
- Reserve slangen en reserve masker
- Andere apparaten die u gebruikt (uitzuig apparaat, hoestmachine en alle nodige spullen)
- Een reserve apparaat als u deze, in overleg met het CTbM, meeneemt
- Een externe accu of een omvormer als dat nodig is
- Een wereldstekker als dat nodig is
- Een brief van het CTbM met de gegevens van uw apparaat voor de douane
- Uw dagboek met het telefoonnummer van het CTbM

Verzekering

Sluit een extra reisverzekering af als u op vakantie gaat.

Medische apparaten en hulpmiddelen zitten vaak **niet** in de gewone reisverzekering.

Bij diefstal van uw apparaten moet u dat op de vakantieplek melden bij de politie. U moet dan een politie rapport mee naar huis nemen.

Vakantie aanvraagformulier

Formulieren opsturen naar (minimaal 6 weken voor aanvang vakantie)

Maastricht UMC+

Centrum voor Thuisbeademing

Antwoordnummer 126

6200 WC MAASTRICHT

E ctbm@mumc.nl

Persoonlijke gegevens

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Telefoon/mobiel

E-mail:

Reisperiode

Van t/m naar(land) Wijze van vervoer:

Apparatuur (a.u.b. aankruisen wat voor u van toepassing is):

- A40 pro
- A40
- Astral
- Hoestmachine
- Asskea
- Medela
- Clario Toni
- PrismaVent
- Trilogy
- Aircurve 10cs

Voor informatie betreffende aanvraag extra apparatuur:

longziekten.mumc.nl/vakantie-en-beademing

In te vullen door CTbM

Ontvangen d.d.

Gezien door:

Advies: wel / geen extra apparatuur

Patiënt op hoogte gebracht d.d.

Toestemmingsverklaring ontvangen d.d.

Medisch certificaat verstuurd d.d.



Scholing Centrum voor Thuisbeademing (CTB)

Voor zorgverleners en mantelzorgers

In Nederland zijn 4 centra voor thuisbeademing. Deze centra zijn allemaal in een Universitair Medisch Centrum. Samen hebben deze centra een scholingsprogramma opgezet voor zorgverleners en mantelzorgers die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten die chronisch beademd worden.



Doel van de scholing

Het doel van de 4 centra is om de kwaliteit van de scholing blijvend te verbeteren en de wijze waarop de zorg verleend wordt op elkaar af te stemmen. Het scholingsprogramma is deels online beschikbaar, zodat zelfstudie mogelijk is. Er is ook achtergrondinformatie en naslagwerk beschikbaar, zoals instructiefilms en informatie over de apparatuur en andere benodigdheden.

De bekwaamheidsverklaring die nodig is voor zorg aan chronisch beademde patiënten kan alleen door de CTB's worden afgegeven.

Programma scholing chronische beademing

Het scholingsprogramma is online beschikbaar op www.ctbscholing.nl, een website van de vier CTB's gezamenlijk.

Inschrijving

U kunt zich inschrijven voor deze scholing via de website www.ctbscholing.nl. Hier vindt u alle informatie over cursussen en data van de praktijkdagen bij de vier CTB's. We noemen deze praktijkdagen "vaardigheidstrainingen", omdat er niet altijd sprake is van een hele dag scholing.

Kosten

Het scholingsprogramma bestaat uit:

- e-learning
- vaardigheidstraining
- toetsing

De e-learning is gratis voor zowel professionele zorgverleners als mantelzorgers. Zorgverleners moeten wel betalen voor het volgen van een vaardigheidstraining, toetsing en het certificaat. Wat dit kost staat op de website. Na betaling via de website kunt u starten met de scholing.

Informatie voor de toetser

De zorgverlener krijgt in zijn/haar organisatie een toetser toegewezen. Deze toetst de zorgverlener en tekent handelingen af die met goed gevolg zijn afgelegd.

Alle toetsers krijgen per email het verzoek om gegevens aan te leveren, zodat het CTB een account voor hen kan aanmaken. De toetsers krijgen per instelling (of locatie van een instelling) een account in het systeem voor gezamenlijk gebruik. Aan dit account worden rechten toegekend die bij deze functie en rol horen namelijk het toetsen van de zorgverlener en aftekenen van handelingen die met goed gevolg zijn afgelegd.

Op deze wijze kunnen de toetsers bijhouden wie er bevoegd en bekwaam is voor het uitvoeren van specifieke beademings gerelateerde handelingen.